

ІДЕАЛЬНА ЕСТЕТИЧНА ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ



ЗІ СКЛОВОЛОКНИМ
ШТИФТОМ І КОМПОЗИТОМ

ENA POST



ENA CEM



CP1000

AESTHETIC POST KIT
ENAPOST 10% CONICITY:
Ena Post Fiber Post ø 0,5 - 1,6 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 0,7 - 1,8 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 0,9 - 2,0 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 1,1 - 2,2 mm 5 Pcs
Ena Post drill 1 x each size 4 Pcs

CP0200

AESTHETIC POST KIT
ENA POST 2% CONICITY:
Ena Post Fiber Post ø 0,8 - 1,25 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 1,0 - 1,45 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 1,2 - 1,65 mm 5 Pcs
Ena Post Fiber Post ø 1,4 - 1,88 mm 5 Pcs
Ena Post drill 1 x each size 4 Pcs

CPCK

DUAL CEMENT INTRO KIT:
Ena Cem^{HF} colors UD1-UD2-UD3-UD4 4x3 g
Ena Bond Bonding 2 ml 1 Pc
Ena Bond Catalyst 2 ml 1 Pc
Ena Etch Etching Gel 37% 2 ml 1 Pc
Accessories

REFILL

CPCUD1	Ena Cem ^{HF} UD1	8 g
CPCUD2	Ena Cem ^{HF} UD2	8 g
CPCUD3	Ena Cem ^{HF} UD3	8 g
CPCUD4	Ena Cem ^{HF} UD4	8 g
CPCUD5	Ena Cem ^{HF} UD5	8 g
COSM300A	Ena Bond Bonding	5 ml
COSM300D	Ena Bond Bonding Catalyst	5 ml
COSM101	Ena Etch Etching Gel 37%	2x2 ml
CPCTIPS	Automix tips brown with needle	50 Pcs
CPCTIPN	Automix tips brown	50 Pcs
CPCTIPL	Intraoral white tips	25 Pcs
COSM3A	Orange applicators with plug	50 Pcs

ENA POST & ENA CEM




УНІКАЛЬНА
АДГЕЗІЯ

ПОВНА
БІОСУМІЩІСТЬ



3 ENA POST
ТА ENA CEM^{HF}

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЗБІЛЬШЕННЯМ

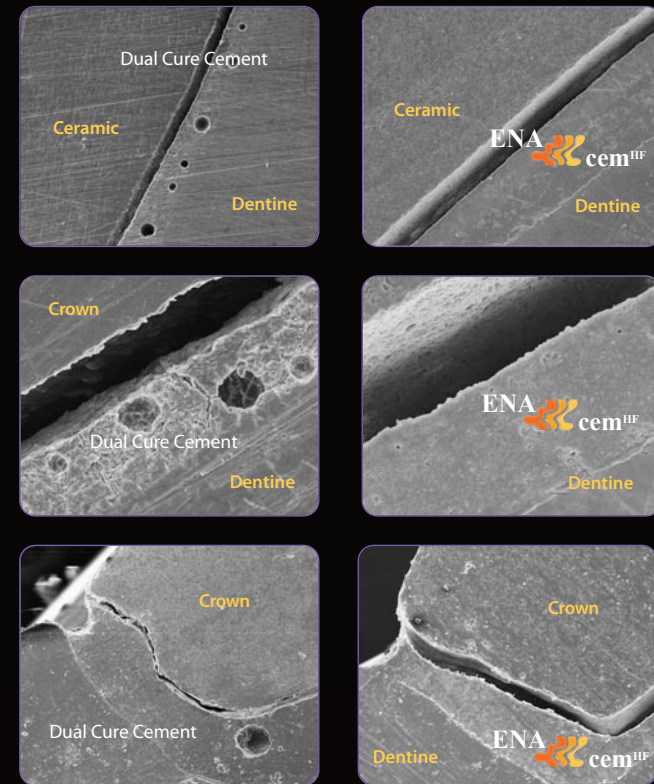

Збільшені зображення показують однорідність **Ena Cem^{HF}** на відміну від інших текучих композитів, які містять повітряні бульбашки.

ВІДМІННА ФІКСАЦІЯ

ENA CEM^{HF} цемент подвійного тверднення на композитній основі

- Фіксація коронок і мостів
- Фіксація штифтів і відновлення культі
- Фіксація композитних і керамічних вінірів, вкладок і накладок

PRODUCT	Ena Cem ^{HF}	Цемент flow подвійного/світлового тверднення	Композит високої в'язкості
Товщина Мп (Сила 35N)	45	28/55	> 500
Твердість за Віккерсом МПА	670	270	600/700
Модуль Юнга МПА	12850	5471	8000/11000
Міцність на згин МПА	116	88	140
Міцність на стиск МПА	342	216	400
Рентгеноконт- растність	210% AI	30% AI	

- високонаповнений (77% за вагою)
- ті самі фізичні характеристики, що й у Enamel plus HRI
- без бульбашок повітря (на відміну від затікань)
- мінімальна товщина < 50 мкм
- флуоресцентний та рентгеноконтрастний



Адгезивна система **Ena Etch-Ena Bond** з каталізатором



**УНІКАЛЬНА
АДГЕЗІЯ**



ENA POST реставрація та відновлення культі за допомогою **ENA CEM^{HF}**
Випадок від доктора Лоренцо Ваніні



Естетичне пряме
відновлення, виконане
за допомогою
ENA POST та
Enamel plus HRI

ENA POST Скловолоконний штифт

- Естетичний: флуоресцентний та має колір дентину
- Функціональний: така сама еластичність, як у дентину
- Ідеально інтегрується із зубом, цементом та реставраційним матеріалом
- Єдиний штифт із силанзованими волокнами, розміщеними в тій самій смолі, що й реставраційний матеріал (Enamel plus HRI)
- Ідеальна силанзація та інтеграція волокон у смолу без жодних недоліків
- Видимий лише на рентгенівському знімку
- Має кольорові кільця для легкої ідентифікації

**ІДЕАЛЬНЕ
УЩІЛЬНЕННЯ
КАНАЛУ**


КОНУСНІСТЬ 2%



За допомогою кольорових кілець можна виміряти глибину каналу.

ЕНА post

АНАЛІЗ ПІД ЗБІЛЬШЕННЯМ

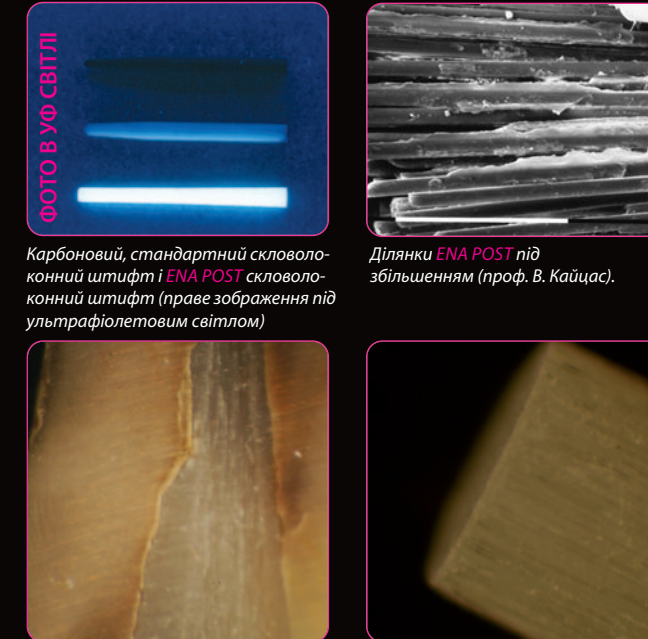

Карбоновий, стандартний скловолоконний штифт і **ENA POST** скловолоконний штифт (праве зображення під ультрафіолетовим світлом)

Ділянки **ENA POST** під збільшенням (проф. В. Кайцас).

КОНУСНІСТЬ 10%



Розмістіть їх у місцях, де потрібно обрізати стовпчик; видаліть їх перед закріпленням.